

FLEXIVISION® 10


原生全高清摄像



Only for
distribution in PRC

- 优异的性能
 - 分辨率为1920 x 1080像素的原生全高清摄像头，逐行扫描
 - 边缘强化和动态对比功能在同类产品中最佳
 - 最新传感器技术：生成最高品质画面，性价比高，坏点自动修复
- 兼容性广泛
 - 可连接所有标准目镜的硬镜、软镜及半软镜
- 节省时间且实用的摄像预先设置
 - 针对腹腔镜检查、关节镜检查、妇产科检查、泌尿科检查、ENT、纤维内镜检查、神经内镜检查进行了最佳的设置
 - 一个电子调焦摄像头-一个控制器
 - 摄像头带有独立可编程背光功能键
- 视频算法
 - 选择性色彩加深功能（SCE）- 能更真实再现血管和组织结构
 - 除烟功能 - 提高分离操作的可视性（例如：使用高频电刀时）
 - 网格消除 - 去除纤维镜图像的蜂格点状干扰
 - 清晰视野 - 排除液体对视野的干扰
- 雪力MIS-Bus接口可使您通过摄像头直接控制光源
- 通过USB采集全高清影像

贴牌产品 - 将我们的专业技术打上您的品牌

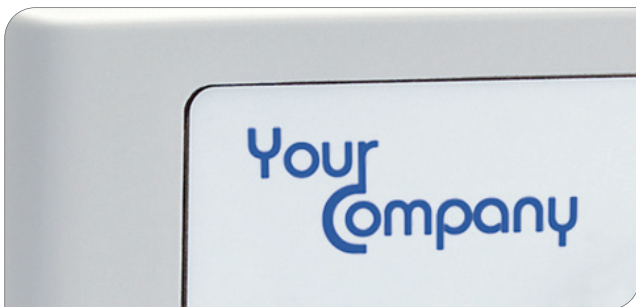

主机贴上您的品牌，摄像头贴上您的品牌



主机贴上您的品牌，摄像头贴上您的品牌



雪力（广州）内窥镜技术有限公司
广州市荔湾区花地大道中501号701-706
邮编：510380

电话：+86 (0) 20 8153 2550
+86 (0) 20 8153 2535
传真：+86 (0) 20 8153 2531

www.schoelly-china.com
info@schoelly-svt.com

FLEXIVISION® 10

原生全高清摄像



技术参数


描述	产品编号
控制器, 四按键, 带视频算法, USB画面摄取	95.3730 *
直型齐焦摄像头, f = 14.25 - 28 mm	95.3701 *
FlexiVision德语版USB医用键盘	PS00510
FlexiVision美式英语版USB医用键盘	PS00511
单极脚踏开关, IPX7单声道插头	6226-ACAA-BZZZ-002

* only for distribution in PRC

摄像头技术参数	
影像传感器	1/3" CMOS逐行扫描
影像传感器分辨率	1920 x 1080像素
功能键	3个可单独编程和带背光的按钮
卡口	适用于标准目镜
摄像头缆线长度/重量	3.5m / 210 g (此重量不含缆线)
控制器技术参数	
控制面板	开关, 菜单, 白平衡, 照相
视频输出	高清: 2 x DVI (1080p), 2 x HD-SDI (1080i)
遥控输出	2 x 3.5 电话插孔接头 (用来连接记录/打印机设备)
遥控输入	2 x 3.5 电话插孔接头 (用来连接脚踏开关)
接口	雪力MIS-Bus接口
尺寸/重量	295 x 100 x 355 mm (宽x高x深) / 4.39 kg
系统	
符合的标准	IEC 60601-1 第2版和第3版
分类	CF类
电源连接	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
功率消耗	0.8 - 0.4 A

备有通过MIS-Bus直接连接的LED光源和BF/CF类导光束。如需更多信息, 请与我们联系。


产品细节

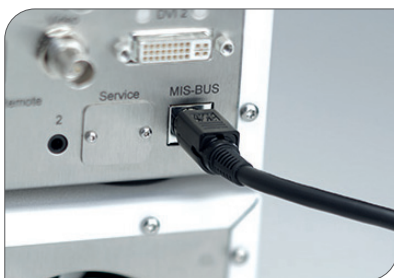

MIS-Bus



高适应性

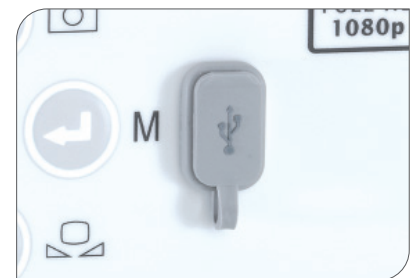

用于摄取图片的前面板USB接口

技术规格会随时变更。信息不具有法律约束力。内容只是涉及我们产品的信息。不允许进行全部或部分翻印。医疗器械只能在得到监管部门批准销售的国家和地区销售和使用。如欲查询允许销售市场的有关资料, 请与我们联系。

MEDICAL ENDOSCOPY
MPA306-000-09-ME
Version: A
12-May-2021