


维修服务


硬镜多等级维修方案

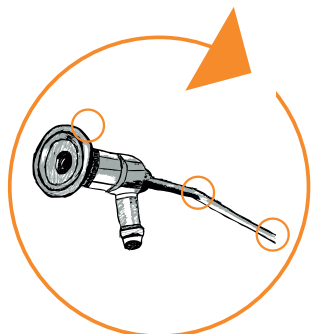

我们的多等级维修方案，为您提供高质量的维修，性价比高，同时又保证病人的安全：

- 如果内窥镜在技术上有可维修性，价格合理，我们为客户提供维修。确保维修内窥镜安全可靠地使用，也降低了用户成本。

硬镜多等级维修方案的流程：

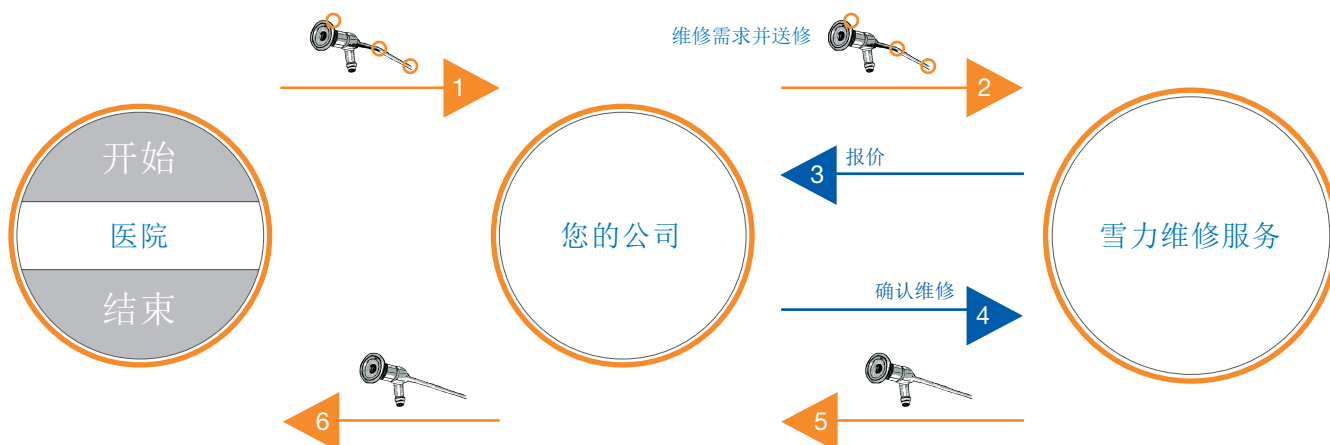

透明

维修由我们的专业技术团队执行。使用雪力德国特制的装配工具，进口配件和维修设备，以及维修技术，标准维修流程和质控。

因此我们保证维修内窥镜安全可靠使用，符合预期用途的合规性。我们根据认证的质量管理体系进行维修，并提供保修期。

随同出货的维修内窥镜，您还可以收到一份维修质量保证书，即保修书。



雪力（广州）内窥镜技术有限公司
广州市荔湾区花地大道中501号701-706
邮编：510380

电话：+86 (0) 20 81532535
传真：+86 (0) 20 81532531

www.schoelly-china.com
info@schoelly-svt.com

维修服务

硬镜多等级维修方案



多维修等级

柱透镜系统硬镜

服务内容	维修等级	翻新保养	维修	维修	维修
	等级 0	等级 A	等级 B	等级 C	等级 C
清洁和消毒	✓	✓	✓	✓	✓
显微镜下外观清洁和初步检查	✓	✓	✓	✓	✓
检测, 损坏分析, 出具报价单	✓	✓	✓	✓	✓
拆卸光学系统		✓	✓	✓	✓
光学检测, 上胶, 打磨	✓	✓	✓	✓	✓
更换柱透镜			1-3 根	1-3 根	1-3 根
更换物镜				✓	✓
更换工作管					✓
更换光纤					✓
眼罩如损坏, 需更换	✓	✓	✓	✓	✓
目镜如损坏, 需更换			✓	✓	✓
重新校对图像			✓	✓	✓
清洁并调整目镜组			✓	✓	✓
清洁光学系统			✓	✓	✓
根据测试规范装配			✓	✓	✓
内窥镜参数调整			✓	✓	✓
密封内窥镜			✓	✓	✓
渗漏测试	✓	✓	✓	✓	✓
质量控制	✓	✓	✓	✓	✓
RTS 维修报告	✓	✓	✓	✓	✓
Navision 系统操作	✓	✓	✓	✓	✓
保修书	✓	✓	✓	✓	✓

技术规格会随时变更。信息不具有法律约束力。内容只是涉及我们产品的信息。不允许进行全部或部分翻印。医疗器械只能在得到监管部门批准销售的国家的销售和使用。如欲查询允许销售市场的有关资料, 请与我们联系。

MEDICAL ENDOSCOPY
MPK301-000-09-ME
Version: 0
2018-Jan-23